

BED HANGER ARTICLE NO. RC876



Thank you for choosing this product. If you observe a few important things, the product will be helpful to you for many years and make your everyday life easier. You should therefore read these operating instructions carefully. Always observe the following safety instructions.

SAFETY INSTRUCTIONS:

Always ensure that you have a secure footing. Only use the lifting pole on a flat, firm surface. Avoid high lateral loads. Never use it for transporting it from bed to armchair or wheelchair. When using it on bed or on adjustable armchairs, ensure that there is sufficient distance from moving parts. Before each use, make sure that the seams, the material of the loop and the fastening elements of the triangle handle are free of damage and securely fastened. For your own safety, change these parts every five years. Do not overload the lifting pole. The maximum load capacity is 90 kg. The lifting aid must not be rocked.

SCOPE OF APPLICATION:

The lifting pole is only suitable for indoor use. In conjunction with most standard beds and due to the low foot height, it can also be used as a stand-up aid for seating furniture. Do not place the lifting pole to the side of the object, but always behind the object at the head or back end. No additional fixings on the wall or on the bed are required. The handle height is just as adjustable as the handle position above the bed or armchair. The lifting pole can be easily dismantled and therefore easily transported and stored. The maximum load capacity is 90 kg. This is suitable for a maximum body weight of 130 kg when used on the bed. If you do not use the product for a long



SeniorSam®


SeniorSam A/S
Sundbyvej 19, 7752 Snedsted Danmark

period of time, store it in a dry place and protected from dust and direct sunlight.

STRUCTURE AND APPLICATION:

Make sure that the packaging is intact during delivery. Any damage must be reported immediately to the delivery personnel. Later complaints can no longer be accepted. Remove all parts from the packaging. All parts of the packaging are recyclable and can be disposed of with the household waste according to local regulations.

Then attach the triangle handle and adjust the height of the triangle handle to the desired length. The product is now ready for use. Position the lifting pole according to the desired application behind the bed or armchair. However, always make sure that the extension arm with the triangle handle is centered above the patient and that the patient does not put any weight on the lifting pole when using it. The triangle handle can be adjusted both in height and in position. To do this, the loop has to be lengthened or too short.

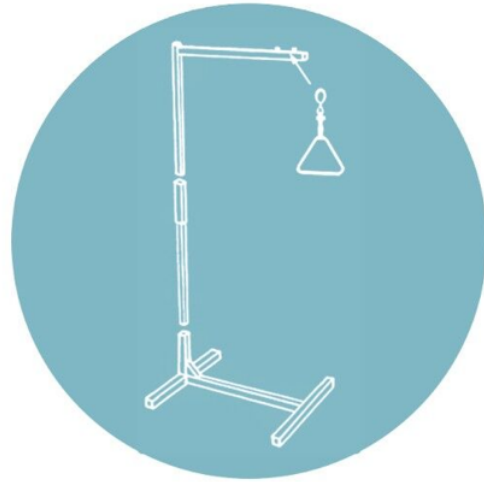

CLEANING AND DISPOSAL:


You can wipe all metal parts and the triangle handle with a mild, non-abrasive household cleaner and a soft cloth. For disinfection, we recommend a commercially available spray disinfection. be sent for recycling.

Technical date:

Size: 83*74cm

Height: 170cm

Net weight: 13.2kg

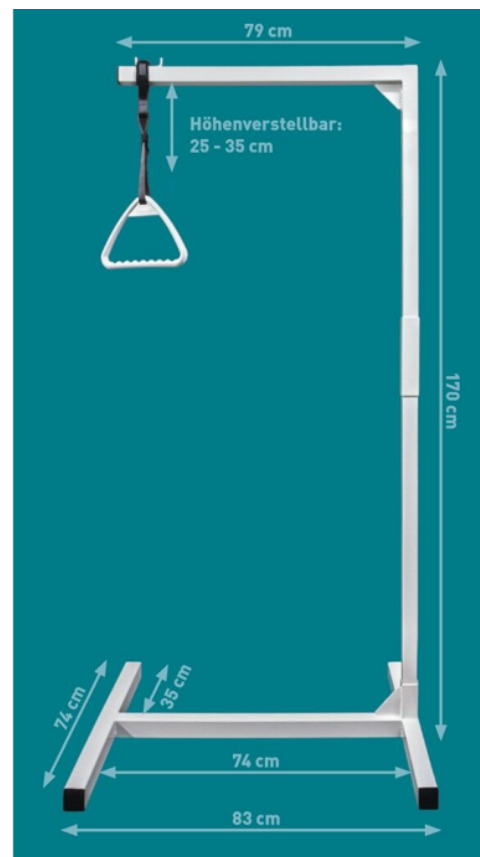

Sengegalge max 100kg

Varenr : RC876



Tak fordi du valgte dette produkt. Hvis du observerer et par vigtige ting, vil produktet være nyttigt for dig i mange år og gøre din hverdag lettere. Derfor bør du læse denne betjeningsvejledning omhyggeligt. Overhold altid følgende sikkerhedsinstruktioner.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER:

Sørg altid for, at du har et sikkert fodfæste. Brug kun løftestangen på en flad, fast overflade. Undgå høje laterale belastninger. Brug den aldrig til at transportere den fra seng til lænestol eller kørestol. Når du bruger den på sengen eller på justerbare lænestole, skal du sørge for, at der er tilstrækkelig afstand til bevægelige dele. Før hver brug skal du sikre dig, at sømmene, løkkens materiale og trekantshåndtagets fastgørelseselementer er fri for skader og sikkert fastgjort. For din egen sikkerhed skal disse dele udskiftes hvert femte år. Overbelast ikke løftestangen. Den maksimale bæreevne er 90 kg. Løftehjælpen må ikke vippes.

ANVENDELSESOMRÅDE:

Løftestangen er kun egnet til indendørs brug. I forbindelse med de fleste standardsenge og på grund af den lave fodhøjde kan den også bruges som ståhjælp til sidde møbler. Placer ikke løftestangen ved siden af genstanden, men altid bag genstanden ved hoved- eller bagenden. Der kræves ingen yderligere fastgørelser på

væggen eller på sengen. Håndtagets højde er lige så justerbar som håndtagets position over sengen eller lænestolen. Løftestangen kan let skilles ad og derfor nemt transporteres og opbevares. Den maksimale bæreevne er 90 kg. Dette er velegnet til en maksimal kropsvægt på 130 kg, når det bruges på sengen. Hvis du ikke bruger produktet i længere tid periode, opbevar det på et tørt sted og beskyttet mod støv og direkte sollys.

STRUKTUR OG ANVENDELSE:

Sørg for, at emballagen er intakt under levering. Enhver skade skal straks anmeldes til leveringspersonalet. Senere klager kan ikke længere accepteres. Fjern alle dele fra emballagen. Alle dele af emballagen kan genbruges og kan bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet i henhold til lokale regler.

Sæt derefter trekantshåndtaget på og juster højden på trekantshåndtaget til den ønskede længde. Produktet er nu klar til brug. Placer løftestangen efter den ønskede anvendelse bag sengen eller lænestolen. Sørg dog altid for, at forlængerarmen med trekantshåndtaget er centreret over patienten, og at patienten ikke lægger vægt på løftestangen ved brug. Trekantshåndtaget kan justeres både i højden og i position. For at gøre dette skal løkken være forlænget eller for kort.



RENGØRING OG BORTSKAFFELSE:

Du kan tørre alle metaldele og trekantshåndtaget af med et mildt, ikke-slibende husholdningsrengøringsmiddel og en blød klud. Til desinfektion anbefaler vi en kommercielt tilgængelig spraydesinfektion. sendes til genbrug.

Teknisk dato:

Størrelse: 83*74cm

Højde: 170 cm

Egenvægt: 13,2 kg

