

# &me.



## INSTRUCTION MANUAL EAR CLEANER

11025065

## INTRODUKTION

Mange tak fordi du har valgt et produkt fra &me. Dermed har du erhvervet et kvalitetsprodukt som opfylder alle gældende krav til præstation og sikkerhedsstandarder i EU. For at sikre en korrekt behandling og en lang levetid anbefaler vi, at du overholder nedenstående anvisninger.

Du bedes læse vejledningen og især sikkerheds anvisningerne omhyggeligt igennem, inden du tager produktet i brug. Opbevar denne betjeningsvejledning, og overlad altid kun produktet til andre sammen med betjeningsvejledningen.

## GENERELLE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

- Forkert brug af produktet kan medføre personskade og beskadige produktet.
- Anvend kun produktet til det, det er beregnet til. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der opstår som følge af forkert brug eller håndtering.
- Anbring altid produktet på et tørt, plant og stabilt underlag på god afstand af bordkant eller lignende.
- Produktet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Produktet må ikke anvendes til erhvervsbrug.
- Rør aldrig ved produktet, ledningen eller stikkontakten med våde eller fugtige hænder.
- Udsæt ikke produktet for direkte sollys, høje temperaturer, fugt, støv eller ætsende stoffer.
- Forlad aldrig produktet, når det er tændt.
- Når produktet er i brug, bør det holdes under konstant opsyn.
- Når produktet bruges skal børn der opholder sig i nærheden af den altid holdes under opsyn.
- Børn må ikke lege med produktet.
- Produktet kan indeholde skarpe dele og bør derfor opbevares utilgængeligt for børn.

- Brug kun tilbehør, der følger med produktet eller er anbefalet af producenten.
- Produktet må ikke bruges af personer med nedsat følsomhed, fysiske eller mentale handicap, eller personer, som ikke er i stand til at betjene produktet, medmindre de overvåges eller instrueres i brugen af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed.

## **LEDNING OG STIK**

- Lad ikke ledningen hænge ud over bordkanten.
- Hold ledningen og produktet væk fra varmekilder, varme genstande og åben ild.
- Tag stikket ud af stikkontakten før rengøring, og hvis produktet ikke er i brug. Undlad at trække i ledningen, når du tager stikket ud af stikkontakten, men tag fat om selve stikket.
- Sørg for, at ledningen er rullet helt ud.
- Kontrollér jævnligt, om ledningen eller stikket er beskadiget, og brug ikke produktet, hvis dette er tilfældet, eller hvis det har været tabt på gulvet, tabt i vand eller er blevet beskadiget på en anden måde.
- Hvis produktet, ledningen eller stikket er beskadiget, skal produktet efterses og om nødvendigt repareres af en autoriseret reparatør. Forsøg aldrig at reparere produktet selv. Kontakt købsstedet, hvis der er tale om en reparation, der falder ind under reklamationsretten. Hvis der foretages uautoriserede indgreb i produktet, bortfalder reklamationsretten.

## **REKLAMATIONSRETEN GÆLDER IKKE:**

- Hvis ovennævnte ikke iagttages.
- Hvis der har været foretaget uautoriserede indgreb i produktet.
- Hvis produktet har været misligholdt, udsat for en voldsom behandling eller lidt anden form for overlast.

## **BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET**

Brugte produkter må ikke smides i husholdningsaffaldet. Iht. lovforskrifterne skal det udtjente produkt bortskaffes på ordentlig

vis. Derved genanvendes de brugbare materialer, og miljøet skånes. Nærmere informationer fås hos den ansvarlige kommunale myndighed eller det lokale bortskaffelsesfirma. Produktet er forsynet med følgende logo:




1




Scan QR-koden  
Download appen

2

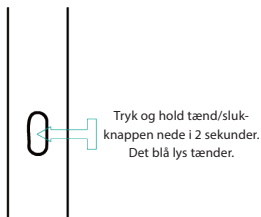


Tryk og hold enhedens tænd/sluk-knap nede for at tænde den.

3

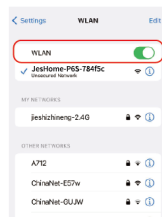


Aktivér Wi-Fi i dine mobilindstillinger.

4

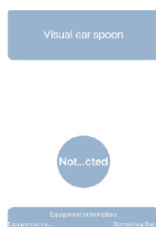


Tryk på "Not connected."  
Enheden opretter automatisk forbindelse til produktets Wi-Fi.

5

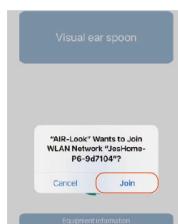

Forbind til produktets Wi-Fi  
En pop-up vises for Wi-Fi:  
JesHome-P6-XXX.  
Tryk på Join.

6

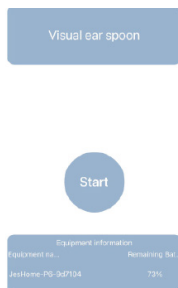

Tryk på "Start" for at begynde at bruge enheden.

7



Enheden er nu klar til brug.

## APPARATPARAMETRE

Omgivende temperatur: -10 °C til 50 °C

Batterikapacitet: 130 mAh

Opladningstid: 40 minutter

Driftstid: 40 minutter

Netværksstandard: IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz)

Billedsensor: CMOS

Objektivdiameter: 3,5 mm

Opløsning ved billedoverførsel: 8 MP

Driftsspænding: 3,7-4,2 V

Indgangsspænding: 5 V/1 A

Mål: 14 mm × 145 mm (H)

Produktvægt: 14,2 g

Ladeterminale: Type-C

## TILBEHØR

- Type-C-opladningskabel × 1
- Silikonemanchetter til ørepind × 5

## UNDERSTØTTELSE AF MOBILTELEFON

1. For Android-telefoner: Understøtter version 5.0 og nyere.
2. For iPhones: Understøtter iOS 10.0 og nyere.

## ADVARSLER

1. Det anbefales, at objektivet rengøres forsigtigt med en vatpind.
2. Kontrollér dine omgivelser før brugen. Brug ikke apparatet i nærheden af personer eller dyr i bevægelse, i et køretøj eller under ustabile forhold. Hold din krop i ro.
3. Apparatet er ikke egnet til børn under tre år.
4. Børn må ikke bruge produktet uden opsyn for at undgå personskader ved et uheld.
5. Udsæt ikke enheden for et fugtigt miljø i en længere periode, og læg ikke enheden ned i væske.
6. Apparatet har et indbygget polymer-batteri, der skal oplades mindst en gang om måneden, hvis det ikke bruges hyppigt.
7. Brug en oplader på 5 V til at oplade enheden. Brug ikke enheden under opladningen.
8. Undgå at udsætte apparatet for direkte sollys.
9. Læg ikke tunge genstande oven på enheden.
10. Apparatet kan blive lettere varmt under brug (op til ca. 35 °C). Dette er normalt.
11. Læg ikke apparatet ned i vand med henblik på rengøring, da det kan medføre skade.

## FEJLFINDING

Serienr.	Fejl	Løsning
1	Ingen reaktion efter start	Oplad enheden ved hjælp af det medfølgende kabel. Opladningstiden er 40 minutter.
2	Lysdiode for kamera tænder ikke	Sluk enheden. Genstart derefter, eller genopret forbindelsen til wi-fi-netværket.
3	Appen går ned	Afinstallér appen. Scan QR-koden, og installér den seneste version.
4	Silikonemanchetten er løs	Fjern silikonemanchetten. Sæt langsomt ørepinden i igen, eller udskift manchetten.
5	Den blå kontrollampe blinker hurtigt	Oplad enheden ved hjælp af det medfølgende kabel, når batteriniveaueet er lavt.
6	Ustabil forbindelse, hyppige afbrydelser eller nedbrud under brug	Genstart ørepinden, og slut den til appen igen.
7	Billedet vises ikke korrekt efter tilslutning af apparatet til appen	Afbryd din telefon fra ørepindens wi-fi-netværk, genstart ørepinden, og opret forbindelse igen.

Kontakt salgstedet, hvis ovennævnte trin ikke løser problemet.

Komponent Navn	Stoffer underlagt begrænsninger i anvendelsen og deres kemiske symboler					
	(Pb)	(Hg)	(Cb)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
Printkort	○	○	○	○	○	○
Kabinet	○	○	○	○	○	○
Ledninger	○	○	○	○	○	○
Plastik-/silikonetilbehør	○	○	○	○	○	○

Bemærk: " ○ " angiver procentdelen af det farlige stof under standardgrænsen.

### TEKNISKE DATA

Artikelnr. 11025065

### PRODUCENT

Epiq ApS  
Krøyer Kielbergs Vej 3, 3. th  
8660 Skanderborg, Danmark  
[www.epiq.dk](http://www.epiq.dk)

Vi tager forbehold for trykfejl.





## INTRODUCTION

Thank you for choosing a product from &me. You have acquired a quality product which meets all applicable performance and safety standards in the EU. In order to ensure proper treatment and a long product life, we recommend that you comply with the instructions below.

Please read the manual and especially the safety instructions carefully before using the product. Keep this manual and provide it for referral along with the product when others are using it.

## GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

- Improper use of the product can cause personal injury and damage.
- Only use the product for what it is intended. The manufacturer is not liable for damages arising from improper use or handling.
- Always place the product on a dry, flat and stable surface well away from table edge or similar.
- The product is intended for household use only. The product is not for professional use.
- Never touch the product, cord or plug with wet or damp hands.
- Do not expose the product to direct sunlight, high temperatures, humidity, dust or corrosive substances.
- Never leave the product when it is turned on.
- When the product is in use, it should be kept under constant supervision. Children should always be supervised when using the product to ensure that they do not play with the product. The product is not a toy.
- The product may have sharp parts and must, therefore, be kept out of reach of children.
- Only use the accessories that come with the product or that are recommended by the manufacturer.
- The product must not be used by people with reduced sensitivity,

physical or mental disability, or people who are not able to operate the product unless they are supervised or instructed by a person responsible for their safety.

## **CORD AND PLUG**

- Do not let the cord hang over the edge.
- Keep the cord and the product away from heat sources, hot objects and open flames.
- Unplug the power cord before cleaning and if the product is not in use. Do not pull the cord when removing the plug from the socket, rather grasp the plug itself.
- Make sure that the cord is fully extended.
- Check regularly that the cord and the plug are not damaged and do not use the product if this is the case, or if it has been dropped on the floor, dropped in water or damaged in another way.
- If the product or plug is damaged, the product must be inspected and, if necessary, repaired by an authorised repairer. Never try to repair the product yourself. Please, contact the store to see if there is a repair that falls under warranty. Tampering of the product will void the warranty.

## **RULES OF COMPLAINTS THE WARRANTY DOES NOT APPLY:**

- If the above is not observed.
- If there has been unauthorised intervention of the product.
- If the product has been mishandled, subjected to rough treatment or some other form of damage.

## **PRODUCT DISPOSAL**

Used product should not be disposed as household waste. According to legislation, the product should be disposed of properly so that the materials can be recycled in an environmentally friendly manner. Further information is available from the responsible local authority or local disposal company. The product

is equipped with the following logo:




1




Scan the QR code  
Download APP

2

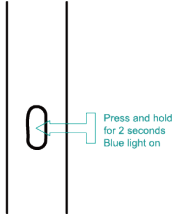

Press and hold the device's power button to turn it on.

3

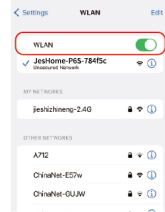


Enable Wi-Fi in your mobile settings.

4



Tap "Not connected."  
The device will automatically connect to the product's Wi-Fi.

5

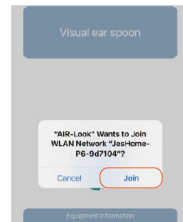

Connect to the product's Wi-Fi  
A pop-up will appear for Wi-Fi:  
JesHome-P6-XXX.  
Tap "Join."

6



Tap "Start" to begin using the device.

7



The device is now ready for use.

## **PRODUCT PARAMETERS**

Ambient Temperature: -10°C to 50°C  
Battery Capacity: 130mAh  
Charging Time: 40 minutes  
Working Time: 40 minutes  
Network Standard: IEEE 802.11 b/g/n (2.4Ghz)  
Image Sensor: CMOS  
Lens Diameter: 3.5mm  
Image Transmission Resolution: 8MP  
Working Voltage: 3.7V-4.2V  
Input Voltage: 5V/1A  
Product Size: 14mm × H145mm  
Product Weight: 14.2g  
Charging Interface: Type-C

## **ACCESSORIES**

- Type-C charging cable × 1
- Silicone earpick sleeves × 5

## **MOBILE PHONE SYSTEM SUPPORT**

1. For Android phones: Supports version 5.0 and above.
2. For iPhones: Supports iOS 10.0 and above.

## **CAUTIONS**

1. It is recommended to carefully clean the lens with a cotton swab.
2. Before use, check your surroundings. Do not use it near moving people or animals, in a vehicle, or in unstable conditions. Keep your body steady.
3. This product is not suitable for children under 3 years old.
4. To avoid accidental injury, children must not use this product alone.
5. Do not expose the device to a humid environment for an extended period or immerse it in liquid.
6. This product has a built-in polymer battery, which must be charged at least once a month if not used frequently.
7. Use a 5V charger to charge the device. Do not use the device while it is charging.
8. Avoid exposing the product to direct sunlight.
9. Do not place heavy objects on the device.
10. During use, the product may heat up slightly (up to approximately 35 °C), which is normal.
11. Do not submerge the product in water for cleaning, as this may cause damage.

## TROUBLESHOOTING

S/N	Fault	Solution
1	No response after startup	Charge the device using the provided cable. Charging time is 40 minutes.
2	Camera indicator does not light up	Turn off the device, then restart or reconnect to WiFi.
3	APP crashes	Uninstall the app, scan the QR code, and install the latest version.
4	Silicone sleeve is loose	Remove the silicone sleeve, reinsert the earpick slowly, or replace the sleeve.
5	Blue indicator flashes quickly	If the battery is low, charge the device using the provided cable.
6	Unstable connection; frequent disconnections or freezing during use	Restart the earpick and reconnect to the app.
7	Image does not display properly after connecting the product to the app	Disconnect your phone from the earpick's WiFi, restart the earpick, and reconnect.

If the above steps do not resolve the issue, please contact the place of purchase.

Component Name	Restricted substances and its chemical symbols					
	(Pb)	(Hg)	(Cb)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
Circuit board	○	○	○	○	○	○
Casing	○	○	○	○	○	○
Wires	○	○	○	○	○	○
Plastic silicone accessories	○	○	○	○	○	○

Note: "○" means the percentage of this hazardous substance does not exceed the standard limit.

### TECHNICAL DATA

Article No. 11025065

### PRODUCER

Epiq ApS

Krøyer Kielbergs Vej 3, 3. th

8660 Skanderborg, Denmark

[www.epiq.dk](http://www.epiq.dk)

We cannot be held responsible for any printing errors.